



PRODUIT NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN MILIEU DENTAIRE

DENTASEPT® SH PRO Wipes

DENTASEPT SH PRO WIPES EST UN PRODUIT NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX EN MILIEU DENTAIRE

Combine une efficacité à large spectre, des temps de contact courts avec une excellente compatibilité matériaux et les propriétés d'un nettoyant doux.

Les caractéristiques du Dentasept SH Pro Wipes permettent une utilisation sur un grand nombre de dispositifs médicaux. Utilisé dans les conditions pratiques comme prévu dans vos protocoles, le produit permet d'atteindre le niveau de conformité obligatoire pour une désinfection efficace afin de limiter la propagation des agents pathogènes.

- Compatible avec les matériaux sensibles à l'alcool
- Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant)
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre
- Lingettes en viscosse 100% biodégradable




DENTASEPT® SH PRO Wipes

Combine une efficacité à large spectre, des temps de contact courts avec une excellente compatibilité matériaux (y compris les surfaces sensibles à l'alcool) et les propriétés d'un nettoyant doux

DONNÉES PHYSICO-CIMIQUES

- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération
- Sans alcool, sans parfum ni colorant
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé
- pH 6
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas...)
- Le substrat est composé à 100% de viscoses

INDICATIONS

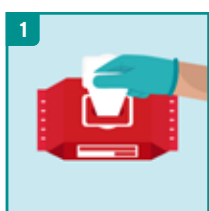

1) Lingettes prêtes à l'emploi. Durée limite d'utilisation après ouverture basée sur EN 16615 : 3 mois.



2) Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.



3) Temps de contact minimum : 2 minutes. Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau, les muqueuses orales



4) Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette, la désinfection ne pourrait plus être garantie.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

ACTIVITÉS/CONDITIONS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide - Actif selon : EN 16615 (2 min), EN 13727* (1 min)	2 min
Levuricide - Actif selon : EN 16615/EN 13624* (2 min)	2 min
Tuberculocide - Actif selon : EN 14348*	60 min
Actif sur les virus enveloppés - Actif selon : EN 14476*	1 min
Actif sur Polyomavirus SV 40 - Actif selon : EN 14476*	5 min
Actif sur Rotavirus - Actif selon : EN 14476*	30 sec
Virucide à spectre limité selon - Actif selon : EN 14476*	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

* Conditions de saleté

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Dentasept SH Pro Wipes	6 x 100 lingettes (180 x 200 mm)	2477655EC



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATIONS

Traitement des dispositifs médicaux en milieu dentaire.

- Entre deux patients : nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non immergeables et non-invasifs, tels les corps de la lampe à photo-polymériser;
- Avant les étapes de nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux (par exemple, les pièces à main rotatives, turbines, contre-angles), et selon les indications du fabricant : enveloppement en vue de leur transport vers la stérilisation et/ou essuyage.

MODE D'EMPLOI

- 1) Lingettes prêtes à l'emploi. Durée limite d'utilisation après ouverture basée sur EN 16615 : 3 mois.
- 2) Appliquer sur la zone du dispositif médical à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.
- 3) Temps de contact minimum : 2 minutes. Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées du dispositif médical destinées à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses buccales, sauf pour les produits traités par enveloppement.
- 4) Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie.

COMPOSITION

Solution d'imprégnation : Chlorure de didécylidiméthylammonium, excipients.

CERTIFICATS

Dispositif médical. L'ensemble des activités antimicrobiennes de Dentasept SH Pro Wipes est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur demande.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage entre +5°C et +25°C.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.



www.anios.com